

DE: BioBloom CBD pain patch Gebrauchsinformation

vers. 1.1/ February 2022

Bitte lesen Sie vor der Anwendung von BioBloom CBD pain patch diese Gebrauchsinformation aufmerksam durch.

Wie funktioniert BioBloom CBD pain patch?

BioBloom CBD pain patch ist ein topisches Produkt mit Acrylat-Copolymer Lösung, das hilft Muskel-/Gelenkschmerzen zu lindern.

BioBloom CBD pain patch ist ein Medizinprodukt. Wirksamkeit und Sicherheit wurden nach der europäischen Richtlinie für Medizinprodukte (93/42/EWG) geprüft.

Wirkprinzip von BioBloom CBD pain patch

BioBloom CBD pain patch wird zur Linderung von Muskel-/Gelenkschmerzen (z.B. Arthritis, Rückenschmerzen, Verstauchungen, Sportverletzungen u.ä.) angewendet.

BioBloom CBD pain patch bietet eine langanhaltende Schmerzlinderung.

Anwendungsgebiete

Zur Linderung von Schmerzen und Schwellungen (z.B. bei Arthritis, Rückenschmerzen, Verstauchungen, Sportverletzungen u.ä.).

Dosieranleitung, Art und Dauer der Anwendung

BioBloom CBD pain patch sollte nur äußerlich auf der Haut verwendet werden. Reinigen und trocknen Sie die betroffene Stelle, bevor Sie das Produkt auf der Haut anbringen. Entfernen Sie die Unterlage vom Pflaster und kleben Sie das Pflaster auf den betroffenen Bereich. Bringen Sie das Pflaster nicht auf verletzter oder gereizter Haut an (z.B. auf sonnenverbrannter, infizierter Haut oder auf Haut mit Kratz- und Schnittwunden oder Ausschlag). Einmal täglich ein Pflaster anwenden. Befolgen Sie alle Anweisungen auf der Produktverpackung. Entfernen Sie das Pflaster vor dem Duschen und kleben Sie es nicht sofort nach dem Duschen auf. Legen Sie an der Stelle, wo das Pflaster angebracht ist, keine Verbände und Wickel an. Decken Sie den zu behandelnden Hautbereich nicht mit einem Heizkissen ab, da dies das Risiko für Nebenwirkungen erhöhen kann.

Wenn Sie Medikamente am betroffenen Bereich anwenden, waschen Sie diese gut ab und verwenden Sie das Pflaster zeitversetzt mindestens 2 Stunden später. Waschen Sie Ihre Hände nach dem Umgang mit dem Pflaster gut. Vermeiden Sie die Berührung von Augen, Nase und Mund mit dem Pflaster.

Falten Sie nach dem Entfernen das gebrauchte Pflaster an den klebrigen Seiten zusammen und entsorgen Sie es im Hausmüll.

Das Produkt ist für den vorübergehenden Gebrauch bestimmt. Sollte 2 – 3 Tage nach Beginn der Behandlung keine Besserung eintreten oder sollten sich die Symptome erheblich verschlechtern, suchen Sie bitte einen Arzt auf.

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- nur zur äußerlichen Anwendung
- das Produkt nicht auf geschädigter oder verletzter Haut verwenden
- Augenkontakt vermeiden. Nach der Anwendung sorgfältig Hände waschen

- nicht empfohlen für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren. Nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden
- außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren
- außerhalb der Reichweite von Haustieren aufbewahren
- Personen mit einer Allergie gegen Alkohol, Lösungsmittel oder einen der Inhaltsstoffe sollten das Produkt nicht verwenden
- während der Schwangerschaft oder Stillzeit nur nach Rücksprache mit einem Arzt anwenden

Gegenanzeigen

BioBloom CBD pain patch darf bei bekannter Überempfindlichkeit gegen einen der Bestandteile nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen

Um Wechselwirkungen mit Arzneimitteln zu vermeiden, sollten Sie Arzneimittel 2 Stunden vor oder nach der Anwendung des Pflasters auftragen oder Ihren Arzt befragen.

Meldung von Vorkommnissen

Sollte die Anwendung des Produktes in Zusammenhang mit schwerwiegenden Vorkommnissen stehen (Tod eines Patienten, Anwenders oder einer anderen Person; vorübergehende oder dauerhafte schwerwiegende Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Anwenders oder anderer Personen; schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Gesundheit), ist dieser Vorfall dem Hersteller und den zuständigen nationalen Behörden zu melden.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Medizinprodukts

BioBloom CBD pain patch darf nur bis zu dem auf der Faltschachtel mit „verwendbar bis“ gekennzeichneten Datum verwendet werden. Aufgrund der Beschaffenheit der Inhaltsstoffe kann es nach einiger Zeit zu einer leichten Veränderung der Farbe kommen. Dies beeinflusst die Qualität des Produktes nicht.

Darreichungsform und Inhalt

Originalverpackung mit 12 Pflaster

Zusammensetzung

Wirkstoffe: Acrylat-Copolymer, Ethylacetat, Ethanol, Heptan, Pentanedion. Sonstige Bestandteile: Cannabidiol (CBD), Arnika Tinktur, Menthol. Enthält Alkohol. Ohne Konservierungsmittel und Farbstoffe.

Aufbewahrung

Kühl (zwischen 10°C und 25°C), trocken und lichtgeschützt aufbewahren.

Entsorgung

Das Produkt kann im normalen Hausmüll entsorgt werden.



Hersteller:
CANNORDIC A/S
Fruebjergvej 3
Copenhagen 2100
Denmark



Symbol CE



Oberer /
unterer
Temperatur-
grenzwert



Verwendbar
bis



Bitte Gebrauchs-
information
beachten



Chargen-
bezeichnung



vor Sonnen-
licht schützen



Bei beschädigter
Verpackung
nicht verwenden



Trocken
aufbewahren



Nicht wieder-
verwenden

Vertrieb: BioBloom GmbH, Frauenkirchenerstr. 12, 7143 Apetlon, Austria, office@biobloom.at, www.biobloom.com

UK: BioBloom CBD pain patch instructions for use

Please read instructions for use carefully before using the BioBloom CBD pain patch.

How does BioBloom CBD pain patch work?

BioBloom CBD pain patch is a topical product with acrylate copolymer solution, which helps relieve muscle/joint pain.

BioBloom CBD pain patch is a medical device. Efficacy and safety have been tested according to the European Directive for Medical Devices (93/42/EEC).

Active Principle of BioBloom CBD pain patch

BioBloom CBD pain patch is used for the relief of muscle/joint pain (such as arthritis, back pain, sprains, sports injuries). **BioBloom CBD pain patch** provides a long lasting pain relief.

Application areas

For relief of pain and swelling (such as arthritis, back pain, sprains, sports injuries).

Dosage instructions, type and duration of application

BioBloom CBD pain patch should only be used on the skin. Clean and dry the affected area before applying the product on the skin. Remove the cover from the patch and apply it to the affected area. Do not apply the patch to injured or irritated skin (e.g. scratched, sunburned, infected or on skin with cuts or rash). The patch can be used once a day. Follow all instructions on the product packaging.

Remove the patch before showering and do not apply it immediately after shower. Do not apply bandages or do not wrap the area where the patch is applied. Do not cover the treated skin area with a heating pad as this may increase the risk for side effects.

If other products are applied to the skin area of the patch - wash it well off and wait around 2 hours before using the patch. Wash your hands well after handling the patch. Avoid getting the patch in your eyes, nose or mouth. After the patch removal, fold the sticky sides of the used patch and dispose of it in the household waste.

The product is for temporary use.

If there is no improvement 2 – 3 days after starting the treatment or if the symptoms have worsened considerably, please consult a doctor.

General precautions

- for external use only
- do not use this product on damaged or injured skin
- avoid eye contact. Wash hands carefully after use

- not recommended for children and adolescents under 14 years of age. Use only after consulting your doctor
- keep out of reach of small children
- keep out of reach of pets
- persons with an allergy to alcohol, solvents or any of the ingredients should not use the product
- during pregnancy or breastfeeding, use only after consulting a doctor

Contraindications

BioBloom CBD pain patch must not be used in cases of known hypersensitivity to any of the ingredients.

Interactions

To avoid drug interactions, you should apply medication 2 hours before or after use or consult your doctor.

Incident reporting

If this product is associated with a serious incident (death of a patient, user or other person; temporary or permanent serious deterioration of the health status of a patient, user or other person; serious risk to public health), this incident must be reported to the manufacturer and the National competent authorities.

Instructions and information on the shelf life of the medical device

BioBloom CBD pain patch may only be used until the date marked “usable until” on the folding box. Due to the nature of the ingredients, a slight color change may occur after some time using the product. This does not affect the quality of the product.

Dosage form and content

Original packaging with 12 patches.

Composition

Active ingredients: Acrylate Copolymer, Ethyl Acetate, Ethanol, Heptane, Pentanedione. Other ingredients: Cannabidiol (CBD), Arnica Tincture, Menthol. Contains alcohol. Without preservatives and colourings.

Storage

Keep cool (between 10°C and 25°C), dry and protected from sunlight.

Disposal


The product can be disposed of with normal household waste.



Manufacturer:
CANNORDIC A/S
Fruebjergvej 3
Copenhagen 2100
Denmark



Symbol CE

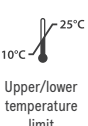

Upper/lower
temperature
limit



Use
by



Please
observe the
instructions
for use



Batch
number



Protect
from
sunlight



Do not use
if the
packaging
is damaged



Store in
a dry place



Do not
reuse

Distributor: BioBloom GmbH, Frauenkirchenerstr. 12, 7143 Apetlon, Austria, office@biobloom.at, www.biobloom.com

FR: BioBloom CBD pain patch mode d'emploi

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser BioBloom CBD pain patch.

Comment BioBloom CBD pain patch fonctionne-t-il?

BioBloom CBD pain patch est un produit topique contenant une solution de copolymère d'acrylate qui aide à soulager les douleurs musculaires/articulaires.

BioBloom CBD pain patch est un dispositif médical. L'efficacité et la sécurité ont été vérifiées conformément à la directive européenne (93/42/CEE) relative aux dispositifs médicaux.

Principe actif de BioBloom CBD pain patch

BioBloom CBD pain patch est utilisé pour soulager les douleurs musculaires/articulaires (telles que l'arthrite, le mal de dos, les entorses, les blessures au sport). **BioBloom CBD pain patch** soulage la douleur de façon durable.

Domaines d'application

Pour soulager les douleurs musculaires/articulaires (telles que l'arthrite, le mal de dos, les entorses, les blessures au sport).

Dosage, nature et durée de l'application

BioBloom CBD pain patch ne devrait être utilisé que sur la peau. Nettoyez et séchez l'emplacement concerné avant d'appliquer le produit sur la peau. Retirez la feuille de protection du pansement adhésif et appliquez le pansement adhésif sur la zone concernée. N'appliquez pas le pansement adhésif sur une peau blessée ou irritée (par ex. sur une peau griffée, brûlée par le soleil, infectée ou une peau comportant des coupures ou une éruption cutanée). Utilisez un pansement adhésif une fois par jour. Suivez toutes les instructions figurant sur la boîte du produit.

Retirez le pansement adhésif avant de prendre une douche et ne le recollez pas immédiatement après la douche. Ne mettez pas de bandage et n'enveloppez pas l'emplacement où le pansement adhésif est appliqué. Ne recouvrez pas d'un coussin chauffant la zone de peau traitée sous peine d'augmenter les risques d'effets secondaires.

Si vous utilisez des médicaments dans la zone concernée, lavez bien celle-ci et utilisez le pansement adhésif avec 2 heures de décalage. Lavez-vous bien les mains après avoir manipulé le pansement adhésif. Évitez de mettre le pansement adhésif dans les yeux, le nez ou la bouche.

Après avoir retiré le pansement adhésif utilisé, pliez celui-ci à l'aide des côtés collants et éliminez-le dans les ordures ménagères.

Ce produit n'est destiné qu'à un usage temporaire.

Si aucune amélioration n'est survenue 2 ou 3 jours après le début du traitement ou en cas d'aggravation considérable des symptômes, consultez un médecin.

Mesures de précaution générales

- destiné uniquement à une utilisation extérieure
- ne pas utiliser ce produit sur une peau endommagée ou blessée
- éviter tout contact avec les yeux. Se laver soigneusement les mains après l'application

- ce produit n'est pas recommandé pour les enfants et les adolescents de moins de 14 ans.
- N'utiliser le produit qu'après en avoir parlé à votre médecin
- conserver le produit hors de portée des jeunes enfants
- conserver le produit hors de portée des animaux domestiques
- ce produit est déconseillé aux personnes allergiques à l'alcool, aux solvants ou à l'un des ingrédients
- pendant la grossesse ou l'allaitement, n'utiliser le produit qu'après avoir demandé conseil à un médecin

Contre-indications

BioBloom CBD pain patch ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue à l'un des composants.

Interactions

Pour éviter toute interaction avec des médicaments, il est recommandé d'appliquer des médicaments 2 heures avant ou après l'utilisation ou de demander conseil à votre médecin.

Déclaration d'incidents

Toute association de ce produit à un incident grave (mort d'un patient, d'un utilisateur ou d'une autre personne; détérioration grave temporaire ou permanente de la santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'autres personnes; risque grave pour la santé publique) doit être signalé au fabricant et aux autorités nationales compétentes.

Remarques et indications sur la durée de conservation du dispositif médical

BioBloom CBD pain patch ne peut être utilisé que jusqu'à la date caractérisée par « à utiliser jusqu'au » sur la boîte pliante. Une légère décoloration liée à la constitution des ingrédients peut survenir après quelque temps. Celle-ci n'influence pas la qualité du produit.

Forme de dosage et contenu

Emballage d'origine contenant 12 pansements adhésifs

Composition

copolymère d'acrylate, acétate d'éthyle, éthanol, heptane, pentanédione. Autres composants: cannabidiol (CBD), teinture d'arnica et menthol. Contient de l'alcool. Sans conservateurs ni colorants.

Conservation

Conserver le produit dans un endroit frais (entre 10 °C et 25 °C), sec et à l'abri de la lumière.

Élimination

Le produit peut être éliminé dans les ordures ménagères.



pain patch

BioBloom CBD

Distribution: BioBloom GmbH, Frauenkirchenstr. 12, 7143 Apetlon, Autriche, office@biobloom.at, www.biobloom.com



Fabricant:
CANNORDIC A/S
Fruebjergvej 3
Copenhagen 2100
Denmark



Symbole CE



Limite
inférieure/
supérieure de
température



Utilisable
jusqu'au



Veillez
respecter le
mode d'emploi



Désignation
du lot



Protéger
de la lumière
du soleil



Ne pas utiliser
si l'emballage
est endommagé



Conserver
au sec



Ne pas
réutiliser